



HELIUM

HIGH-PERFORMER



UITSTEKENDE PRESTATIES

De Helium gebruikt technologieën uit de fiets-, auto- en vliegtuigindustrie. Dankzij het gebruik van ultralicht, ovaal gevormd en gehard aluminium gecombineerd met innovatieve high-tech materialen is de Helium de meest efficiënte mobiliteitsoplossing.

// EXTREEM LICHTGEWICHT

De Helium is ultralicht en de complete rolstoel weegt, zonder quick release assen en achterwielen, minder dan 3,8* kg! Lichtgewicht materialen, zoals carbon zijkanten, clip style zitbekleding, carbon asbuis en een carbon voetplaat maakt van de Quickie Helium een echte lichtgewicht rolstoel.

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren.



// 92° COMPACT PERFORMANCE VOORFRAME

Door te kiezen voor een voorframe van 92°, wordt de Helium nog compacter. De keuze van 80°, 88° en 92° zorgt ervoor dat altijd de ideale zithouding bereikt kan worden.



// FRAME INSET

Een inset van maximaal 30 mm per zijde zorgt voor een goede geleiding van de benen en maakt de stoel extra compact.





ULTIEM DESIGN

Het minimale, ultra-moderne design van de Helium zorgt ervoor dat jij in de schijnwerpers komt te staan. Door het uitgebreide assortiment aan functionele en lifestyle opties is de Helium aan te passen aan iedere stijl.

// COMFORTABELE EN STIJLVOLLE RUGBEKLEDING

De rugbekleding is naspanbaar en beschikbaar in nylon (EXO Evo) en luchtdoorlatend (EXO Evo Pro). De rugbekleding beschikt over twee opbergruimtes waarvan eentje afsluitbaar is met een rits.

Verder is het mogelijk om 5 kleuraccenten te kiezen, namelijk zwart, zilver, oranje, blauw en rood.



// RUIM AANBOD AAN FRAMEKLEUREN

Personaliseer de Helium door te kiezen voor één van de vele framekleuren.



// CREËER EEN EIGEN STIJLVOLLE LOOK MET EEN FRAME MOTIEF

De gelaserde floating dots zijn te kiezen in de kleuren zwart, mat zwart, rood, zilver, oranje en blauw.




// GEKLEURDE VOORVORKEN EN VOORWIELEN

De Carbitecture voorvorken zijn verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren, namelijk zilver, blauw, rood, oranje en zwart. Deze kunnen eventueel gecombineerd worden met geanodiseerde voorwielen in dezelfde kleur.



// MAAK DE STIJL COMPLEET

Ook de naaf en de velg van de lichtgewicht achterwielen kunnen in een kleur geanodiseerd worden, namelijk in rood, oranje en blauw.

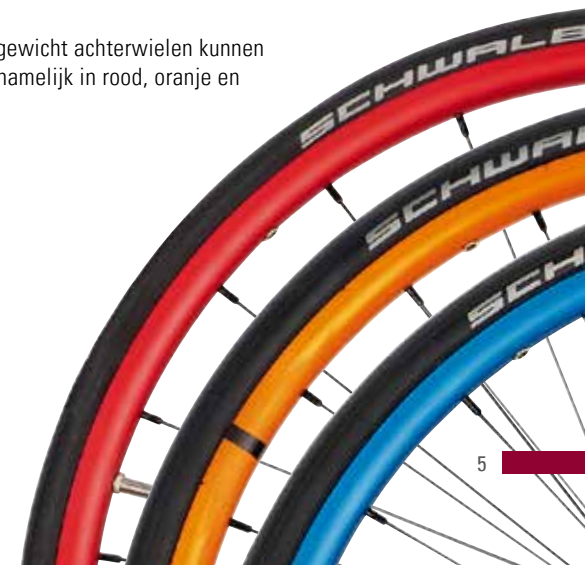



HELIUM

DE INSTELBARE HELIUM

De Helium maakt indruk door het minimalistische design maar beschikt toch over veel aanpasbaarheid. Het is geen probleem om onder andere de rughoek, de zithoogte of het zwaartepunt tussentijds aan te passen. Zo houdt de Helium altijd zijn goede rijeigenschappen met een goed comfort, een echt gepersonaliseerde rolstoel.



HELIUM PRO

DE ULTIEME PRO

Bij de Helium Pro is het frame vastgelast. De gelaste zwaartepuntinstelling en rughoek zorgen voor het hoogste haalbare niveau van stijfheid in het frame. Daarnaast vergroot dit het minimalistische design van de Helium.

// VASTGELASTE VOORDELEN

De toegevoegde stijfheid door het vastgelaste zwaartepunt en rughoek zorgen voor een nog betere energieoverbrenging. Toch blijft het mogelijk om het zwaartepunt met 10 mm aan te passen.



// ERGOZIT

Het is mogelijk om het zit- en rugframe individueel en ergonomisch op maat te laten maken. Dit heeft als voordeel dat het meer stevigheid biedt in het bekken (insluiten van het bekken), waardoor je steviger in je rolstoel zit en het meer stabiliteit geeft.

ULTRA MODERN FREESTYLE RUGFRAME

Dit innovatieve rugframe zorgt voor onbeperkte bewegingsvrijheid. De onmiskenbare stijl van dit rugframe maakt de Helium werkelijk uniek. Het rugframe kan uitgerust worden met de lichtgewicht Jay J3 Carbon rugleuning of een Jay J3 aluminium rugleuning in de framekleur. Met een Jay rugleuning wordt de houding optimaal ondersteund zodat er volledige bewegingsvrijheid is in het bovenlichaam.



OPTIES EN ACCESSOIRES

De Helium is te configureren naar elke individuele behoefte. Dit zijn enkele opties, op het orderformulier is een volledig overzicht te vinden.



// PROTON ACHTERWIELEN

Deze lichtgewicht achterwielen wegen ruim één kilo minder ten opzichte van de kruisgespaakte wielen.



// COMFORTABELE ACHTERVERING

De achtervering ziet er zeer sportief en modern uit en verbetert het rijcomfort.



// ANTI-TIP FLIP UP

Deze eenvoudig opklapbare anti-tip oplossing is eenvoudig zelf te bedienen.



// NEERKLAPBARE DUWHANDVATTEN

Altijd duwhandvatten beschikbaar zonder dat ze in de weg zitten als ze niet nodig zijn.



// SINGLE-ARM DESIGN VOORVORK

Sterk en modern design, voor een stijlvolle en aantrekkelijke look.



// COMPACTE SCHAARREMMEN

Mooi weggewerkt, eenvoudig te gebruiken en direct op het frame geplaatst.



// ELLIPSE HOEPELS

De rubberen strip aan de bovenkant van de ergonomisch, ovaalgevormde hoepels zorgt voor maximale grip.



// SPINERGY WIELEN

De 12- of 18-spaaks Spinergergi achterwielen zijn de sterkste die er zijn en ze zien er ook nog eens enorm goed uit.

NEEM JE HELIUM.....


De Helium maakt gebruik van innovatieve lichtgewicht materialen en opties, waardoor de rolstoel lichter is dan ooit tevoren. Dit is niet alleen merkbaar tijdens het rijden, maar zeker ook tijdens het tillen van de rolstoel. Een complete Helium (pro) zonder achterwielen en assen is mogelijk vanaf 3,8* kg, dit maakt de Helium een echt aluminium lichtgewicht!

// EENVOUDIG TE TILLEN EN PAST IN ELKE AUTO

De Helium kan uitgerust worden met twee ergonomisch vormgegeven handgrepen die door hun vorm en positie het tillen en balanceren van de rolstoel vereenvoudigen. Door te kiezen voor de neerklapbare rugleuning past de Helium zeker in elke auto.

// CRASHTEST

De Helium is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19. Wanneer een transfer dus niet mogelijk is, kan de Helium gebruikt worden als zitplaats in de auto.

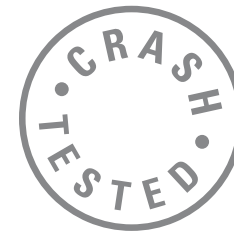

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

...OVERAL MEE NAAR TOE

Ervaar vrijheid als nooit tevoren door de Helium te koppelen aan een Attitude aankoppelfiets. Door het slimme innovatieve aankoppelmechanisme blijven er na het afkoppelen slechts 2 kleine pinnen op de rolstoel achter die samen slechts 170 gram wegen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Helium	Helium Pro		Helium	Helium Pro
Zitbreedte:	320 - 460 mm	320 - 460 mm	Framehoek	80°, 88° of 92°	80°, 88° of 92°
Zitdiepte:	340 - 480 mm	340 - 480 mm	Frame inset:	0, 10 of 30 mm	0, 10 of 30 mm
Zithoogte - voor:	430 - 570 mm	430 - 570 mm	Zwaartepuntinstelling:	20 - 104 mm	20 - 104 mm
Zithoogte - achter:	370 - 500 mm	370 - 500 mm	Camber:	0°, 3°, 6° of 9°	0°, 3°, 6° of 9°
Rughoogte:	250 - 450 mm	250 - 450 mm	Transportgewicht:	4,8 kg	3,8 kg
Rughoekinstelling:	-31° - +15°	-4° - +4°	Gewicht vanaf*:	6,8 kg	6,4 kg
Onderbeenlengte:	220 - 520 mm	220 - 520 mm	Maximale gebruikersgewicht:	125 kg	100 kg
Zithoek:	0 - 130 mm	0 - 130 mm	Crashtest	•	-

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.
 Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
 • De Quickie Helium is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be